

# MANUALE DI UTILIZZO

---

*MNPG74-02 Edizione 01/03/19*

Materassino per magnetoterapia

# *OSTEOMAT*

*I.A.C.E.R. Srl*

*[www.itechmedicaldivision.com](http://www.itechmedicaldivision.com)*

**I.A.C.E.R. Srl**

Via S. Pertini 24/A – 30030

Martellago (VE) ITALY

Tel. +39 041 5401356 – Fax +39 041 5402684

e-mail: [iacer@iacer.it](mailto:iacer@iacer.it)

<http://www.itechmedicaldivision.com>

<i>Sommario</i> .....	3
<b>Introduzione</b> .....	4
<i>Informazioni tecniche</i> .....	5
<b>Caratteristiche tecniche</b> .....	5
<i>Modalità d'uso</i> .....	6
<b>Istruzioni per l'uso di Osteomat</b> .....	6
<b>Cura di Osteomat</b> .....	6
<b>Pulizia di Osteomat</b> .....	6
<b>Assistenza</b> .....	6
<b>Garanzia</b> .....	7

## **Introduzione**

*Il materassino **OSTEOMAT** è il nuovo materassino per trattamenti di magnetoterapia a bassa frequenza. Tale materassino nasce dall'esigenza di trattare contemporaneamente più parti del corpo e per tempi di terapia prolungati.*

*È ormai nota l'efficacia della magnetoterapia nel recupero delle condizioni fisiologiche di equilibrio delle strutture cellulari. I campi magnetici pulsati, infatti, agiscono sulle membrane cellulari favorendo lo scambio ionico tra i due lati della membrana. Questo porta a ripristinare il corretto potenziale transmembrana che è fondamentale per assicurare l'apporto di nutrienti all'interno della cellula.*

*A livello di organi e strutture anatomiche questi effetti si traducono in analgesia, riduzione dell'infiammazione, stimolo al riassorbimento degli edemi.*

*In più la magnetoterapia a bassa frequenza risulta particolarmente indicata per la stimolazione della rigenerazione delle fratture e per rallentare il processo di diminuzione della densità ossea innescato dall' **osteoporosi**.*

*L'osteoporosi, divenuto ormai un fenomeno sociale in aumento, implica la necessità di intervenire sull'architettura scheletrica nel suo complesso. A tal proposito la possibilità di utilizzare un materassino permette di intervenire in maniera sistemica sull'intero organismo.*

*Il nuovo materassino **OSTEOMAT** rappresenta dunque lo strumento ideale per trattare più segmenti corporei in un'unica seduta grazie alla sua grande semplicità d'uso ed estrema flessibilità.*



**Caratteristiche tecniche:**


- Dimensione materassino completo: 160x65x2 cm;
- 4 settori attivi;
- 2 cavi di collegamento;
- Compatibile con i modelli MAG2000, MAG2000 PLUS e modelli LaMagneto;
- Telo di copertura materassino in TNT (2 pezzi).

Il materassino Osteomat è costituito da 4 settori attivi, contenenti 2 solenoidi ciascuno, per un totale di 8.

Attenzione: si consiglia di applicare sul materassino il telo di copertura in TNT prima del suo utilizzo.

La configurazione dell'Osteomat è stata pensata per andare a stimolare quelle zone del corpo (spalle, colonna, bacino) che maggiormente sono colpite da una riduzione della massa ossea, sintomo tipico dell'osteoporosi.

Fare riferimento all'immagine seguente per la disposizione dei solenoidi (indicata dai cerchi) all'interno dell'Osteomat.

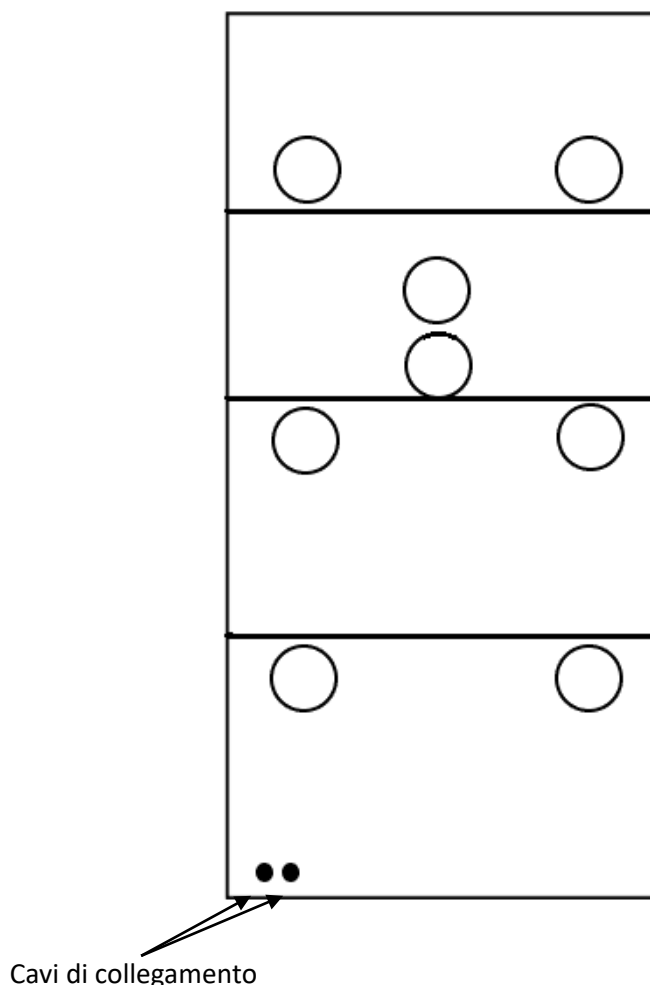

### **Istruzioni per l'uso di Osteomat**

*Per utilizzare il materassino Osteomat è sufficiente seguire i seguenti semplici passi:*

- 1. Collegare i due cavi del materassino rispettivamente alle due prese CH1 e CH2 poste sul pannello nella parte superiore dell'apparecchio in uso (MAG2000, MAG2000 PLUS o dispositivo della famiglia LaMagneto);*
- 2. Avviare il programma scelto seguendo le apposite istruzioni riportate nel manuale d'uso del dispositivo;*
- 3. Posizionarsi sopra il materassino prestando attenzione a distendersi dal lato indicato come terapeutico dall'apposita etichetta.*

### **Pulizia di Osteomat**

*Per la pulizia di Osteomat si raccomanda di scollegare il materassino dal dispositivo prima di compiere qualsiasi operazione. Procedere alla pulizia del tessuto con un panno inumidito con semplice acqua e sapone neutro ed attendere la completa asciugatura prima di riutilizzare il materassino per una seduta terapeutica.*

### **Assistenza**

*Il fabbricante è il solo esclusivista per interventi di assistenza tecnica sul materassino terapeutico Osteomat. Per qualsiasi intervento di assistenza tecnica rivolgersi a:*

**I.A.C.E.R. S.r.l.**

Via S. Pertini, 24/a • 30030 Martellago (VE)

Tel. 041.5401356 • Fax 041.5402684

## **Garanzia**

*Osteomat è coperto da garanzia di 2 anni a decorrere dalla data di acquisto. La garanzia decade in caso di manomissione, incuria ed uso inappropriato del materassino ed in caso d'intervento sullo stesso da parte di personale non autorizzato dal costruttore o dal rivenditore autorizzato.*

OSTEOMAT. Tutti i diritti sono riservati. OSTEOMAT ed il logo  sono di esclusiva proprietà di I.A.C.E.R. Srl e sono registrati



## I.A.C.E.R. Srl

Via S. Pertini 24/A - 30030 Martellago (VE) - Italia / Italy

Tel.: (+39) 041/5401356 - Fax: (+39) 041/5402684

Email: [iacer@iacer.it](mailto:iacer@iacer.it) - PEC: [iacer@pec.it](mailto:iacer@pec.it) - Web: [www.itechmedicaldivision.com](http://www.itechmedicaldivision.com)

Cod. Fisc. / P.IVA / Vat Number: IT00185480274 - Codice SDI: SUBM70N

R.E.A.: VE N. 120250 - M. VE001767 - Capitale Sociale / Share Capital: € 110.000,00 i.v.

