



MICRO DERMOABRASIÓN

Instrumento de belleza

(Micro Dermabrasion)

ESPAÑOL

MICRO-DERMOABRASIÓN (MICRO DERMABRASIION)


Estimados clientes,

Gracias por elegir nuestro producto! Por favor, lea este manual antes de su uso con el fin de garantizar el máximo rendimiento del instrumento y la seguridad en su uso. Por favor, consérvelo para futuras consultas.

FUNCIÓN

Eliminar el envejecimiento de la piel, mejorar la textura de la piel, blanquear, mejorar cicatrices y irregularidades de la piel; acelerar la circulación sanguínea y mejorar los poros dilatados.

DESCRIPCION DEL PANEL DE OPERACIONES

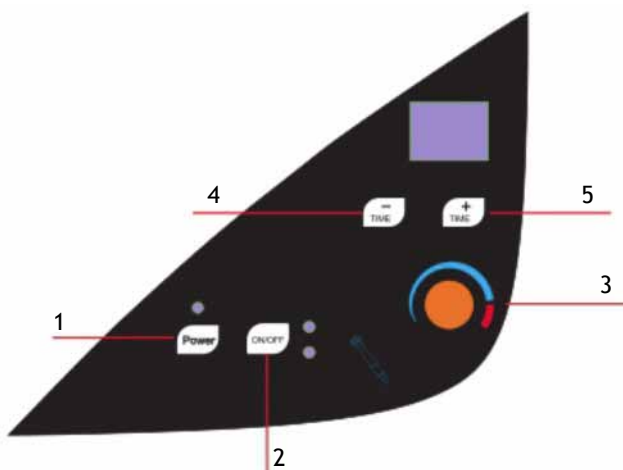

1. Encendido
2. ON / OFF
3. Regulador De Presión
4. Reducir el tiempo
5. Aumentar el Tiempo

OPERACIÓN

1. Elija la punta adecuada e instale en la parte superior de la empuñadura, conecte el manipulador en la interfaz de detrás de la máquina con la manguera.

2. Enchufe, presione (1), el indicador se vuelve verde, tiempo de muestra (30 minutos), y el indicador (2) se vuelve rojo, lo que significa que la máquina se encuentra en espera.
3. Presione (2), el indicador se vuelve verde y el segundo punto del tiempo parpadea, lo que significa que la máquina está empezando a trabajar.
4. Elija la resistencia adecuada, de baja a alta ajustando el regulador de presión en la dirección de las agujas del reloj.

NOTAS

1. Antes de ponerse los guantes, la técnica deberá limpiarse las manos con alcohol
2. Los accesorios deben ser esterilizados y mantenerlos limpios y secos. La máquina está equipada con puntas de dermoabrasión de varios tamaños para diferentes usos. Instalación como en la siguiente foto:



PRECAUCIÓN

1. Para mover este instrumento, hay que levantarlo y bajarlo suavemente; en caso de fallo, por favor, no lo golpee con el fin de evitar el mal funcionamiento causado por el impacto.
2. Para mover este instrumento, es necesario mantenerlo horizontal de manera que se eviten las vibraciones y el impacto.
3. No presione el instrumento o coloque cosas pesadas en el instrumento para evitar la deformación de la carcasa, daños o mal funcionamiento.
4. Es necesario seleccionar la fuente de alimentación correspondiente que trabaja en acuerdo con las marcas en el cuerpo del instrumento.
5. No está permitido el uso de este instrumento en el baño.

6. Para prevenir accidentes, cuando hay tormenta, por favor apague y desconecte el interruptor de alimentación.
7. No está permitido inyectar cualquier fluido en el cuerpo del instrumento a fin de evitar que el instrumento se dañe debido a un cortocircuito.
8. Si el instrumento no se utiliza durante un largo tiempo, es necesario retirar el cable de alimentación de la toma de corriente.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Voltaje de funcionamiento: CA 220V - 240V AC

La potencia máxima de la máquina : 20W

Tamaño del embalaje: 27 * 14 * 27 (L *W* H) cm



MICRO-DERMOABRASIÓN

Instrument de beauté

FRANÇAIS

MICRO-DERMOABRASIÓN (MICRO DERMABRASION)


Chers clients,

Merci d'avoir choisi notre produit! Lisez s'il vous plaît ce manuel avant utilisation pour assurer la performance de l'instrument et une sécurité maximale lors de son utilisation. Veuillez le conserver pour les utilisations futures.

FONCTION

Enlever le vieillissement de la peau, améliorer la texture de la peau, blanchir, améliorer les cicatrices et les irrégularités de la peau; accélérer la vitesse de circulation du sang, et améliorer les pores dilatés.

DESCRIPTION DE L'ÉCRAN DES OPÉRATIONS

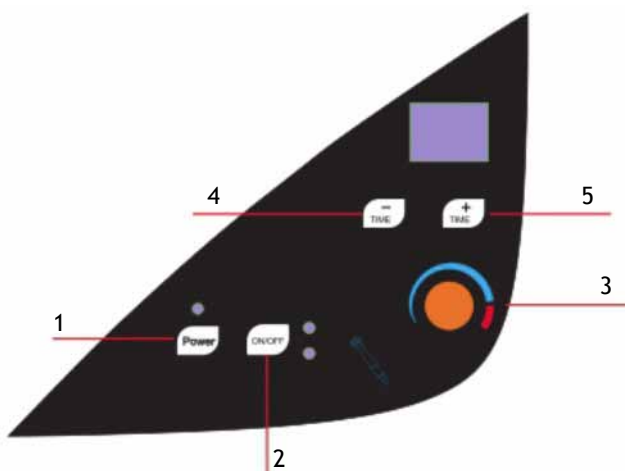

1. Allumer
2. ON/OFF
3. Régulateur de pression
4. Réduire le temps
5. Augmenter le temps

OPERATIONS

1. Choisissez la partie adéquate et installez sur la partie supérieure de la poignée, connectez le manipulateur à l'arrière de la machine avec le tuyau.
2. Branchez, appuyez sur (1), l'indicateur devient vert, le temps d'échantillon (30 minutes), et l'indicateur (2) devient rouge ce qui signifie que la machine est en veille.
3. Pressez (2), l'indicateur devient vert et le second point de l'heure clignote, ce qui signifie que la machine démarre.
4. Choisissez la résistance appropriée, de faible à élevé en ajustant le régulateur de pression dans le sens des aiguilles d'une montre.

NOTES

1. Avant de mettre des gants, le technicien devra se laver les mains avec de l'alcool.
2. Les accessoires doivent être stérilisés et maintenus propres et secs. La machine est équipée de points de dermoabrasion de différentes tailles pour différents usages. L'installation est comme la photo suivante:



PRECAUTIONS

1. Pour déplacer cet instrument, il faut qu'il soit soulevé et baissé délicatement; en cas d'échec, ne pas donner de coup dans le but d'éviter le mauvais fonctionnement causé par l'impact.
2. Pour déplacer l'instrument, il est nécessaire de le maintenir horizontalement de façon à éviter les vibrations et les impacts.
3. Ne pas exercer de pressions sur l'instrument, ou déposer des objets lourds dessus pour éviter une déformation.


4. Il est nécessaire de sélectionner la source d'alimentation de travail en accord avec la marque de l'instrument.
5. Il est interdit d'utiliser cet instrument dans une salle de bain.
6. Pour éviter les accidents, pendant une tempête, veuillez éteindre et débrancher la machine de l'interrupteur.
7. Evitez qu'un liquide entre dans l'appareil, cela pourrait provoquer un court-circuit et endommager l'appareil.
8. Si l'instrument n'est pas utilisé pendant un long moment, il est nécessaire de retirer la prise de courant.

PARAMETRES TECHNIQUES

Tension : 220V-240V AC

La puissance maximale de la machine est de 20W

Taille de l'emballage : 27*14*27 (L*W*D) cm

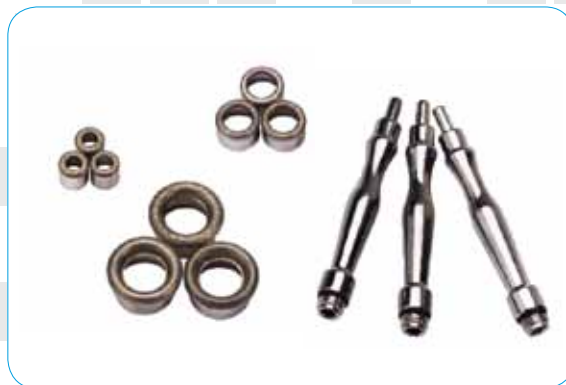

MICRODERMOABRASIONE

Strumento di bellezza

(Micro dermoabrasione)

ITALIANO

MICRO-DERMOABRASIONE (MICRO DERMABRASION)


Stimati clienti,

Grazie per aver scelto il nostro prodotto! Si prega di leggere questo manuale prima dell'uso in modo da garantire il massimo delle prestazioni e la sicurezza d'uso. Per favore, conservarlo per riferimenti futuri.

FUNZIONE

Rimuovere l'invecchiamento della pelle, migliorando la struttura della pelle, sbiancamento, miglioramento delle cicatrici e irregolarità della pelle; accelerazione della circolazione sanguigna e miglioramento pori dilatati.

DESCRIZIONE DEL PANNELLO OPERAZIONI

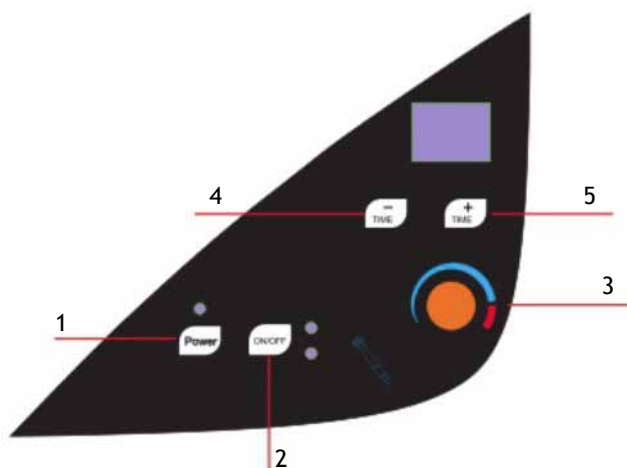

1. Accensione
2. Acceso/Spento
3. Regolatore di pressione
4. Ridurre il tempo
5. Aumentare il tempo

OPERAZIONE

1. Elija la punta adecuada e instalar en la parte 1. Scegliere l'ago adeguato e installare sulla parte superiore dell'impugnatura, collegare il manico all'interfaccia dietro la macchina con un tubo.

2. Inserire la spina, premere (1), l'indicatore diventa verde, il tempo appare (30 minuti), e l'indicatore (2) diventa rosso, il che significa che la macchina è in standby.
3. Premere (2), l'indicatore diventa verde e il secondo punto del tempo lampeggia, il che significa che la macchina comincia a lavorare.
4. Scegliere la resistenza appropriata, da bassa ad alta, muovendo il regolatore di pressione in direzione oraria.

NOTE

1. Prima di indossare i guanti, il tecnico deve pulire le mani con l'alcol
2. Gli accessori devono essere sterilizzati e mantenuti puliti e asciutti. La macchina è dotata di punte di dermoabrasione di differenti formati per usi diversi. Installazione come nella seguente immagine:



ATTENZIONE

1. Per spostare lo strumento, bisogna alzarlo e abbassarlo con cautela; in caso di guasto, si prega di non sbatterlo al fine di evitare malfunzionamenti causati dall'impatto.
2. Per spostare lo strumento, è necessario mantenerlo orizzontale in modo da evitare urti e vibrazioni.
3. Non premere lo strumento o posizionare oggetti pesanti sullo strumento per evitare la deformazione dell'involucro, danni o malfunzionamenti.
4. È necessario selezionare la relativa fonte di alimentazione che lavora in accordo con le indicazioni sul corpo dello strumento.
5. Non è consentito usare questo strumento nella stanza da bagno.

6. Per evitare incidenti, quando c'è un temporale, si prega di spegnere e scollegare l'interruttore di alimentazione.
7. Non è consentito iniettare alcun fluido nel corpo dello strumento per impedire danni dovuti a cortocircuiti.
8. Se lo strumento non viene utilizzato per un lungo tempo, è necessario rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa.

PARAMETRI TECNICI

Tensione: CA 220V - 240V AC

La potenza massima della macchina: 20W

Formato dell'imballaggio: 27 * 14 * 27 (L P) cm



MICRO DERMOABRASAO

Instrumento de Beleza

(Micro Dermabrasion)

PORTUGUÊS


MICRO-DERMOABRASAO (MICRO DERMABRASION)

Obrigado por escolher o nosso produto! Por favor leia este manual antes de usar para garantir o máximo desempenho do instrumento e segurança no seu uso. Por favor, mantenha-o para o futuro consultas.

FUNÇÃO

Eliminar o envelhecimento da pele, melhorar a textura da pele, iluminá-la, melhorar cicatrizes e irregularidades da pele; aumentar a circulação de sangue e melhorar o aspeto dos poros dilatados.

DESCRIÇÃO DO PAINEL DE OPERAÇÕES

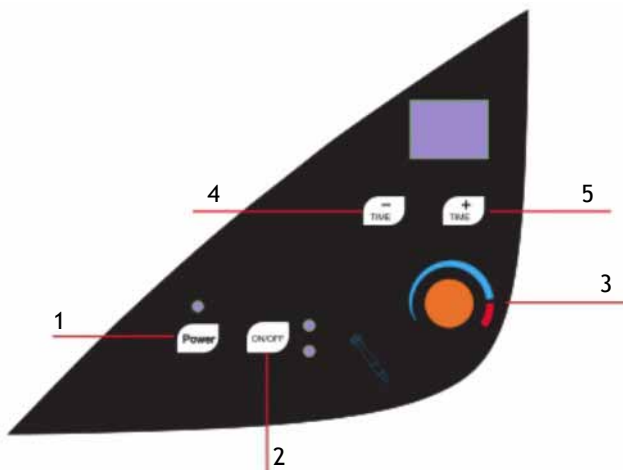

1. Ligado
2. ON / OFF
3. Regulador de pressão
4. Reduzir o tempo
5. Aumentar o tempo

OPERAÇÃO

1. Escolha a ponta adequada e instale na parte superior da alavanca, conecte o manipulador na interface traseira da máquina com a mangueira.
2. Ligue, pressione (1), o indicador ficará verde, tempo de amostra (30 minutos), e o indicador (2) torna-se vermelha, o que significa que o aparelho está em modo de espera.

3. Pressione (2), o indicador fica verde, o que significa que a máquina está começando a trabalhar
4. Escolha a resistência adequada, de baixo para cima ajustando o regulador de pressão na direção dos ponteiros do relógio.

NOTAS

1. Antes de colocar as luvas, o técnico deve limpar as mãos com álcool.
2. Os acessórios devem ser esterilizados e mantidos limpos e secos:



PRECAUÇÃO

1. Para mover o aparelho, deve levantá-lo e baixá-lo suavemente;
2. Para mover o aparelho, precisa de o manter na horizontal, de modo a evitar vibrações e o impacto.
3. Não pressione o instrumento ou coloque objetos pesados no instrumento para impedir a sua deformação.
4. Você precisa selecionar a fonte de energia de trabalho correspondente de acordo com as marcas no corpo do instrumento.
5. Não é permitido usar este instrumento no banho.
6. Durante trovoadas, desligue-o da fonte de alimentação para evitar um acidente.
Desligue o interruptor de energia e desconecte o cabo de alimentação.
7. Evite qualquer tipo de líquido no aparelho, pois pode causar curtos-circuitos e danificar o dispositivo
8. Se o instrumento não for usado por um longo tempo, que é necessário desligá-lo da ficha.

PARÂMETROS TÉCNICOS

Voltagem de funcionamento: CA 220V - 240V AC

Potência máxima da máquina : 20W

Tamanho da embalagem: 27 * 14 * 27 (L *W* H) cm



MICRO-DERMABRASION

Schönheitsgerät

Mikrocomputer - BEHANDLUNGSANLEITUNG

DEUTSCH

MICRO-DERMABRASION

Sehr geehrte Kunden,


Vielen Dank für Ihren Kauf! Bitte lesen Sie die Anleitungen gründlich durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für späteren Nachschlagen.

DIE FUNKTION

Die Micro-Dermabrasion ist eine sanfte und schonende Methode zur Regeneration und Verjüngung der Haut an Gesicht und Körper, sowie auch zur Verbesserung der Durchblutung. Besonders geeignet ist die Micro-Dermabrasion zur Korrektur von großporiger Haut, Aknenarben, feinen Fältchen z.B. im Oberlippenbereich, Pigmentflecken.

Die Beschreibung der Schalttafel

DESCRIPCION DEL PANEL DE OPERACIONES

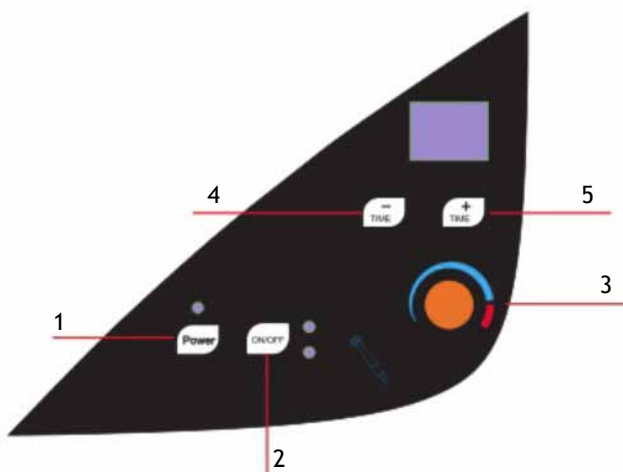

1. Ein/Aus-Schalter
2. ON / OFF
3. Der Druckregler
4. Die Behandlungszeit reduzieren
5. Die Behandlungszeit erhöhen

BEHANDLUNG

1. Stecken Sie den gewählten Aufsatz in den Handgriff und stecken Sie das Stromkabel an der Geräterückseite ein.
2. Schalten Sie das Gerät ein, drücken Sie die Taste "POWER".

Die LED-Anzeige wird grün leuchten und auf dem Display wird die Behandlungszeit von 30 Minuten gezeigt.

Die LED-Anzeige 2 leuchtet rot, was bedeutet, dass das Gerät in Standby ist.

3. Drücken Sie die Taste 2, die LED-Anzeige wird grün leuchten, was bedeutet, dass das Gerät betriebsbereit ist.
4. Stellen Sie den entsprechenden Widerstand, von niedrigen bis höchsten in die Richtung von Uhrzeigersinn ein.

BEWERTUNGEN

1. Der Techniker muss die Hände mit Alkohol reinigen, bevor die Handschuhe zu tragen.
2. Die Zubehöre sollen sterilisiert sein, sowie auch sauber und trocken gehalten werden. Das Gerät wird standardmäßig mit verschiedenen Aufsätzen geliefert. Jeder Aufsatz wurde speziell entwickelt, um die betreffenden Gesichtspartien sorgfältig zu behandeln.

Die Einstellung des Geräts finden Sie in folgendem Bild.



SICHERHEITSHINWEISE


1. Um dieses Gerät zu bewegen, müssen Sie es anheben und vorsichtig abstellen.
Wenn das Gerät nicht funktioniert, bitte klopfen Sie darauf nicht mit dem Ziel die Fehlfunktion zu vermeiden.
2. Um dieses Gerät zu bewegen, muss es horizontal gehalten werden, um die Vibrationen und die Stößen zu verhindern.
3. Um eine Deformierung des Gehäuses, Schäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden, drücken Sie das Gerät nicht oder stellen Sie darauf keine schweren Gegenstände.
4. Wählen Sie die entsprechende Stromversorgung aus, die zur Spannung des Geräts passt.
5. Verwenden Sie das Gerät niemals in feuchter oder unbelüfteter Umgebung, wie z.B. Feuchträume oder Badezimmer, um Schaden an den elektrischen Komponenten Ihres Geräts zu vermeiden.
6. Schalten Sie das Gerät bei Gewitter aus, um die Schädigungen zu vermeiden. Trennen Sie den Netzadapter sofort vom Stromnetz .
7. Es ist nicht erlaubt die Flüssigkeit ins Gehäuse des Gerätes einzuspritzen, um das Gerät nicht zu beschädigen.
8. Wenn das Gerät für lange Zeit nicht verwendet wird, ist es notwendig, den Netzadapter vom Stromnetz zu trennen.

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 220V AC - 240 V AC

Maximale Leistung des Geräts: 20W

Verpackungsgröße: 27 * 14 * 27 (L * W * H) cm

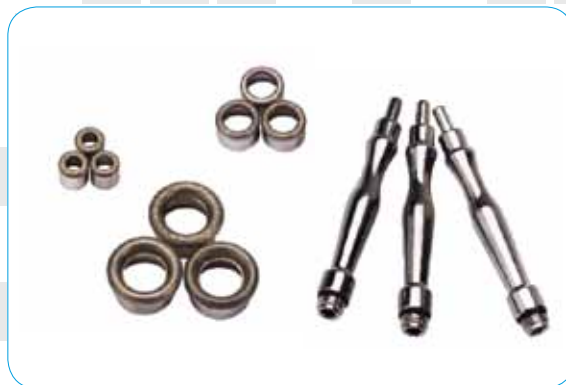

MIKRO-DERMABRAZJA Beauty Instrument

Mikrokomputer · Instrukcja Obsługi

POLISH

MIKRO-DERMABRAZJA (BEAUTY INSTRUMENT)


Szanowni Państwo,

Dziękujemy za wybór naszego produktu! Proszę przeczytać tę instrukcję przed użyciem w celu zapewnienia maksymalnej wydajności aparatu i bezpieczeństwa w użyciu. Proszę zachować ją na przyszłość.

FUNKCJE



Usuwa oznaki starzenia się skóry, poprawia jej strukturę, wybiela, poprawia blizny i nieprawidłowości skóry; przyspiesza krążenia krwi i zamyka otwarte pory.

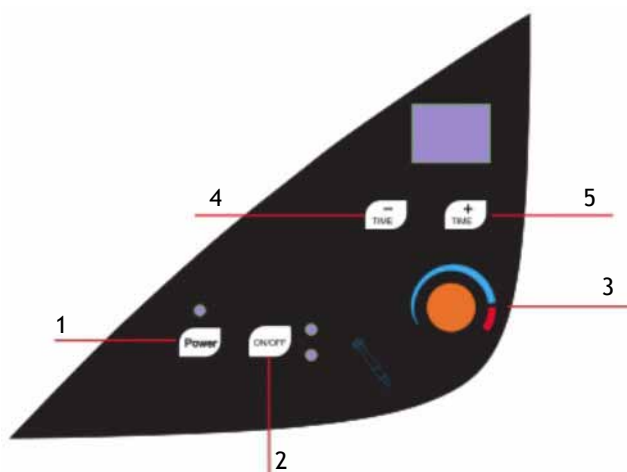OPIS PANELU DZIAŁALNOŚCI




1. Przycisk zasilania
2. Przycisk ON / OFF
3. Regulator ciśnienia
4. Skrócenie czasu
5. Zwiększenie czasu

DZIAŁANIE

1. Wybierz odpowiednią końcówkę i zainstaluj ją w górnej części uchwytu, podłącz głowicę do interfejsu znajdującego się w tylnej części maszyny.
2. Podłącz, naciśnij , zmieni kolor na zielony, wyświetli się czas standardowy (30 minut), a następnie wskaźnik  zmieni się na czerwony,

co oznacza, że urządzenie jest w trybie gotowości.

3. Naciśnij przycisk , wskaźnik zmieni kolor na zielony, drugi punkt w czasie miga, co oznacza, że maszyna zaczyna pracować.
4. Wybierz odpowiednią moc, od niskiej do wysokiej, dostosowując ją do regulatora ciśnienia w kierunku ruchu wskazówek zegara.

UWAGI

1. Przed założeniem rękawic, specjalista powinien zdezynfekować również swoje ręce.
2. Akcesoria powinny być sterylizowane i zachowane czyste i suche. Maszyna wyposażona jest końcówki dermabrazji o różnych rozmiarach do różnych zastosowań. Instalacja, jak na poniższym rysunku:



OSTRZEŻENIA

1. Aby przenieść ten instrument, należy go podnieść i odłożyć delikatnie; w przypadku awarii, proszę nie pukać w urządzenie w celu uniknięcia możliwych usterek spowodowanych uderzeniem.
2. Aby zachować urządzenie w należytym stanie, należy przechowywać go w poziomie, tak aby uniknąć drgań i uderzeń.
3. Nie naciskaj na instrument i nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu, aby zapobiec deformacji obudowy, uszkodzenia lub awarii.
4. Musisz wybrać odpowiednie źródło zasilania w pracy, zgodnie z oznaczeniami na korpusie instrumentu.
5. Nie wolno używać tego urządzenia w łazience.

6. W czasie burzy wyłącz urządzenie i odłącz zasilanie, aby uniknąć wypadku.
7. Należy zapobiec przedostaniu się jakiegolwiek cieczy do urządzenia, ponieważ może to spowodować zwarcie i je uszkodzić.
8. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć przewód zasilający z gniazda

DANE TECHNICZNE

Napięcie: 220V AC - 240V AC

Maksymalna moc maszyny: 20W

Rozmiar opakowania: 27 * 14 * 27 (L * W * H) cm